

DEStrade
mesas de cirugía

Sillón de parto vertical

DI 403 / 408



Manual del Usuario

Sillón de parto vertical

Gracias por elegir las mesas de cirugía Vivax de DEStrade Industrial S.R.L.

Este **Manual del Usuario** le ofrecerá información concerniente al uso y al mantenimiento adecuado del Sillón de Parto vertical DI 403 (mecánico) y DI 408 (eléctrico).

Simbología utilizada en este manual:



Este símbolo identifica la información relevante para la seguridad.



Este símbolo acompaña las notas que lo ayudarán a evitar complicaciones durante la operación.




Conserve este manual y consúltelo cada vez que sea necesario.


Índice:

01. Posapiés para parto vertical	1
02. Sector podálico	2
03. Respaldo	2
04. Pierneras ginecológicas	2
05. Hombreras	2
06. Movimientos	2
07. Accesorios	2
08. Mantenimiento	2

Posapiés para parto vertical

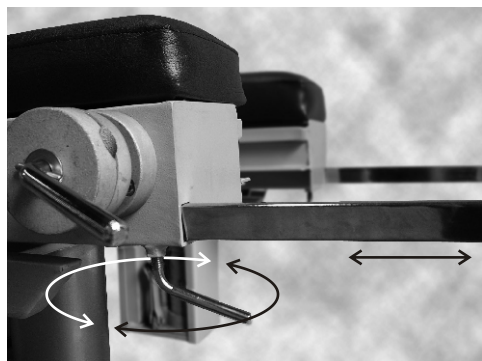

Los posapiés se utilizan para parto vertical. Se introducen en la ranura A y se ajustan, una vez definida la distancia, con la manivela B.

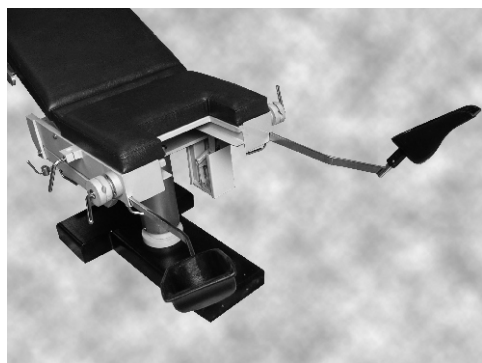

Sector podálico



Se agrega el sector podálico cuando se desea transformar el sillón en mesa de cirugía para una eventual cesárea.




Respaldo




Para reclinar el respaldo, trabar haciendo coincidir con las perforaciones para evitar deslizamientos no deseados.



Pierneras ginecológicas

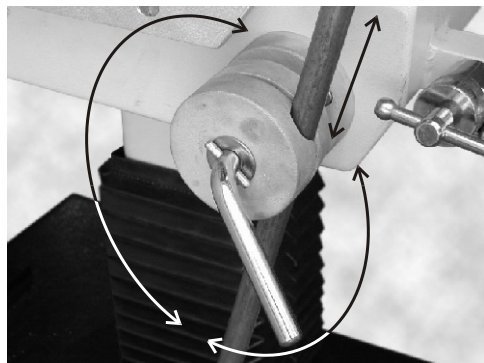

Para rotar la pienera debe desajustar la morza dentada y girar la posición del eje.

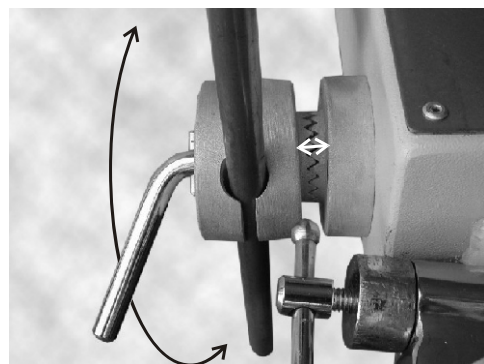

La morza se ajusta y afloja mediante la palanca indicada en la foto.




Asímismo, la pienera puede girar libremente sobre un punto base. La palanca bloquea el movimiento.

Hombreras




Para ajustar el desplazamiento horizontal de la hombarrera, afloje o ajuste la palanca roscada A.

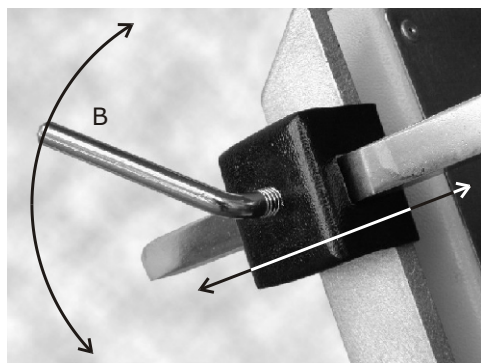


Para ajustar el desplazamiento vertical de la hombarrera, afloje o ajuste la palanca roscada B.

Movimientos mecánicos

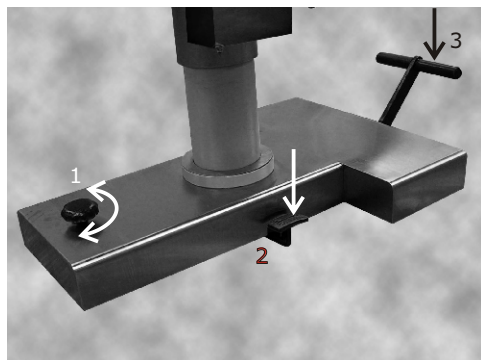

Sólo DI 403:

1. Freno
2. Descenso
3. Ascenso

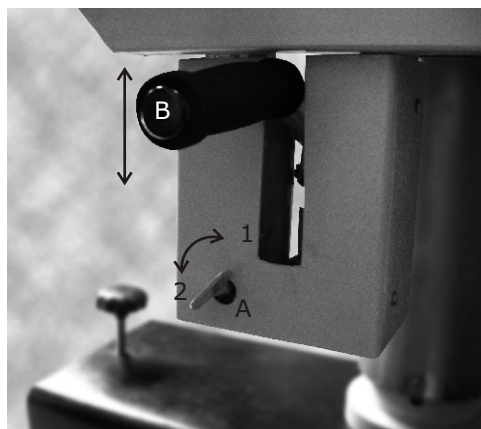

Sólo DI 403:


Bombeando con la palanca B se realiza el trendelenburg.

Mantener A siempre en posición 1.


Llevar a posición 2 sólo para eliminar trendelenburg (ejerciendo una leve presión sobre el sector elevado). Luego, volver A a la posición 1.




Movimientos eléctricos

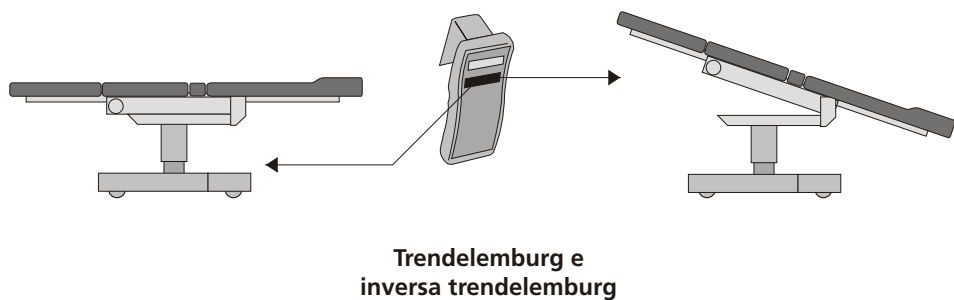

Accesorios

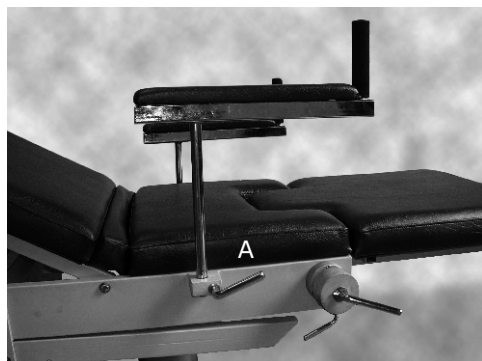

Aflojar manivela A y tirar para arriba los posabrazos para sacarlos.

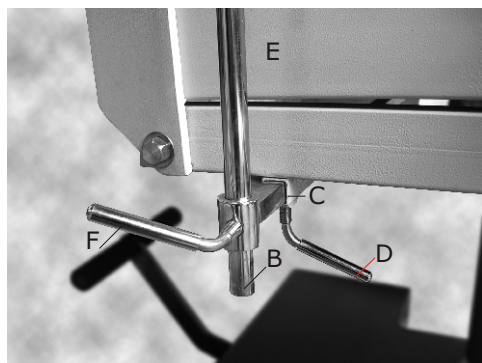

Portasueros:
Introducir B en C y ajustar con D. Luego, introducir E (portasueros) en B y ajustar con manivela F.



Asiento removible para facilitar la higiene. Calzar a presión.

Mantenimiento



Sólo en DI 403:
En caso que el descenso no sea continuo y suave: a. Elevar la mesa hasta que se vea el tornillo detrás del orificio de la carcasa que cubre la columna. b. Ajustar 1/4 de vuelta.

Limpieza y esterilización



IMPORTANTE

Las mesas de cirugía, no se esterilizan, dado que son elementos no críticos, donde el paciente sólo toma contacto con su piel intacta.

El procedimiento adecuado para ellas es el de **limpieza o desinfección de bajo nivel**.

Recomendamos **limpiadores desinfectantes de la línea de los amonios cuaternario**, que son compatibles con el ámbito hospitalario.

El cloro (hipoclorito de sodio) es corrosivo para metales, y sólo debe ser usado en pisos y baños. Nunca con mobiliario hospitalario. **El único cloro compatible es el orgánico (cloroisotiocianato), en pastillas (ej PRESEPT de J&J)**

Fuente:

Silvia Robilotti (Esterilizar.com)

Farmacéutica graduada en la UBA.

Jefe de Central de Esterilización de:

Clínica y Maternidad Suizo Argentina

Sanatorio Agote

Sanatorio Otamendi



Si la mesa de cirugía es limpiada con cloro (hipoclorito de sodio) es muy posible que se dañe. **Concientice al equipo de limpieza y enfermería sobre este tema**. La empresa no se hace responsable de los daños que ésta pueda sufrir por su mala limpieza.

Características técnicas

Modelo: DI 408

220V 1.5A 50Hz

Funcionamiento Intermitente
(10%, 2'/18')



Aparato categoría AP



Parte aplicable tipo B

IPX4

Protección IPX4



Aparato clase II



Atención:
consultar documentación
acompañante

Condiciones de uso, transporte y
almacenamiento (rangos sugeridos)

Temperatura: -10 a 40°C
Humedad: 30 a 95%
Presión: 600 a 1060hPa

Medidas

Largo sin el cabezal:
Largo con el cabezal:
Ancho de la mesa:
Ancho entre los rieles laterales:
Alto:
Trendelemburg:
Antitrendelemburg:
Lateralidad:
Respaldo levantado:
Respaldo bajo:

Sector podálico levantado:
Sector podálico bajo:
Carga máxima permisible:
Consultar a la firma antes de
cargar la mesa con pesos
mayores.

Datos de contacto

DEStrade Industrial S.R.L.

Dr. Coulin 2252 / 2000 Rosario
Santa Fe, República Argentina

Tel/Fax: +54+341+4646236

Email: info@destradeind.com.ar

Web: www.destradeind.com.ar

